


定格・仕様

販売名	アルカリッチ NDX-303LMW		
電源	AC 100 V 2.4 A 50/60 Hz		
消費電力	240 W(最大) 約 3.6 W(待機時)		
類別	機械器具 83 医療用物質生成器		
一般的名称	連続式電解水生成器		
医療機器認証番号	223AFBZX00047000 <管理医療機器>		
整水器 本体	寸法	幅 335 mm×奥行 100 mm×高 242 mm	
	重量	約 4.2 kg(満水時) 約 3.8 kg(乾燥時)	
カート リッジ	寸法	幅 108 mm×φ89 mm×高 272 mm	
	重量	約 2.0 kg(満水時) 約 1.2 kg(乾燥時)	
カラ	寸法	幅 45 mm × 奥行 190 mm × 取付高 340 mm	
給水仕様	電子水栓操作による電磁弁の開閉 (給水管接続)		
電解方式	連続式電解方式(流量センサ内蔵)		
連続使用最高水温	35℃		
連続使用最高水圧	0.5 MPa (付属の減圧弁を必ず施工すること)		
電解 (電解水素水 選択時)	吐水量	水圧 0.2MPa時	電解水素水: 約3.3L/分、酸性水: 約0.7L/分 ※浄水時: 約4.0L/分 (トップアップのみ)
		水圧 0.1MPa時	電解水素水: 約2.6L/分、酸性水: 約0.6L/分 ※浄水時: 約3.2L/分 (トップアップのみ)
	吐水比率	電解水素水: 酸性水 4.5 : 1	
	電解レベル	3段階 (電解モード: 流量追従(標準)+定電流) 計6段階	
	連続使用 可能時間	約30分(標準)※ 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時)	
	電極洗浄	F.F.(フリップ・フロップ)方式	
電解槽寿命	800時間		

浄水 カートリッジ (AR303K)	ろ過流量	4.0 L/分		
	最小動水圧	1.1 MPa		
	ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布		
	浄水能力 <sup>※31</sup>	遊離残留塩素	総ろ過水量	12,000 L
		濁り	総ろ過水量	12,000 L
		溶解性鉛	総ろ過水量	6,000 L
		CAT(農薬)	総ろ過水量	6,000 L
		?-MIB(カビ臭)	総ろ過水量	6,000 L
		トリハロメタン	総ろ過水量	6,000 L
		クロロホルム	総ろ過水量	6,000 L
プロモジクロロメタン		総ろ過水量	6,000 L	
ジプロモクロロメタン		総ろ過水量	6,000 L	
プロモホルム		総ろ過水量	6,000 L	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量	6,000 L		
トリクロロエチレン	総ろ過水量	6,000 L		
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量	6,000 L		
ろ材の 交換時期 の目安 <sup>※32</sup>	旧約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。 また、使用水量、水質によって交換時期の目安が 短くなる場合があります)			
カルシウム添加 保護装置	強制溶解型添加方式 添加筒内蔵(電解補助剤) 電流ヒューズ 6.3A (基板上に実装)			

注1: 家庭用浄水器試験方法 (JIS S 3201) に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。  
注2: 本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。

製品寸法

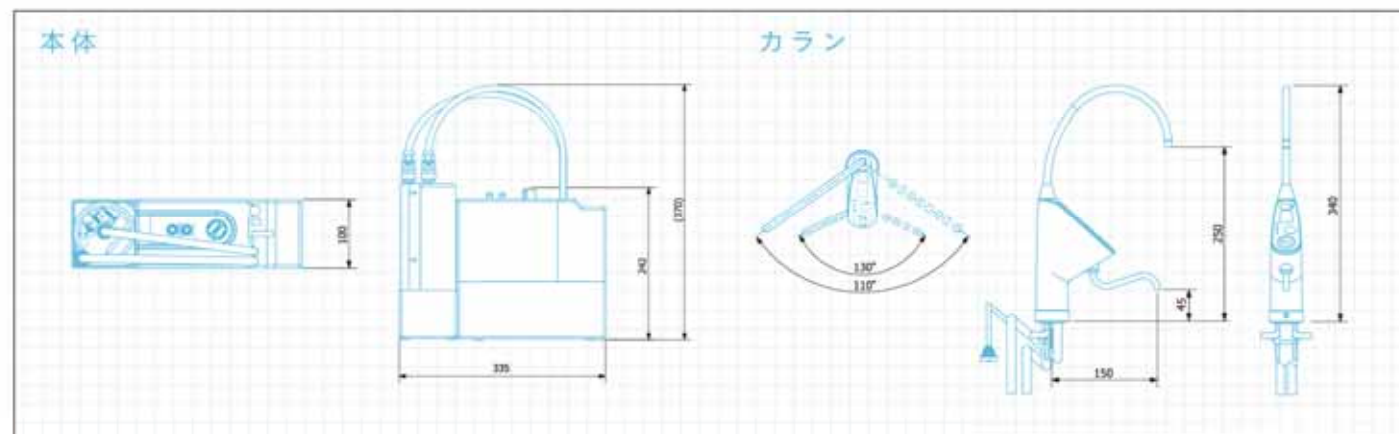

お取り付けいただいたその日から  
末永いお付き合いが始まります。

おいしい水をお届けして40年余。当社では、購入日や機種など、お客様のデータをコンピュータに管理し、カートリッジの交換時期にはお電話でご連絡。定期交換のお知らせとご都合のよい交換日時をご相談させていただきます。また、交換には当社スタッフ又は販売店が、ご訪問いたします。交換はもちろん、責任をもって点検するメンテナンスシステムです。(サービスエリアのみ) サービスエリア外についてはカートリッジは郵送となります。詳しくはOSGコンシューマーセンターまでお問い合わせください。

取扱店・販売店



OSGコーポレーションイメージキャラクター  
料理家 栗原心平

製造販売元 株式会社OSGコーポレーション  
東京営業本部 〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MTビル7F  
本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目26番3号 (OSG 本社ビル)

お問い合わせは  
OSGコンシューマーセンター  
0120-065-631  
受付時間: 平日9:00~18:00(土・日・祝日は休み)



# UNDER SINK STYLE

健やかな暮らしを運ぶ水、  
水素たっぷり、電解水素水

## アルカリッチ NDX-303LMW

指定管理医療機器製造販売承認番号  
第223AFBZX00047000号



# 美しい水、美しい空間。

「電解水素水」のスマートスタイル、アンダーシンク型生成器



## シンク下に納まる「スリム&コンパクト」

生成器本体とカートリッジは、シンク下の引き出し裏の配管スペースに納まるスリム&コンパクト設計。キッチンをより広く、美しくお使いいただけます。



## スムーズな設置を実現する「上面施工」

キッチンの上部から水栓を設置できる「上面施工方式」を採用。取り付け工事がより簡単に、スピーディーになりました。



アルカリッチ (NDX-303LMW)

本体価格 238,000円 (別途消費税)

交換用浄水カートリッジ (AR303K) 本体価格 18,800円 (別途消費税)

環境性と使いやすさを考えたら、この形が正解でした。

## 経済的な多水量、ムダ水をカットする省排水設計

アルカリッチ303の「電解水素水」生成能力は、当社比で[3:1] (電解水素水:酸性水)から[4.5:1]に向上しました。ムダを排除し、経済的な多水量を実現。



浄水選択時に「電解水素水」出水口側からのみ出水することにより、ムダ水を廃止。水の消費量を抑えられる、家計にも環境にもやさしい設計です。


## LEDバックライト液晶を搭載 (電子水栓)



使用状態に合わせてLEDバックライトが点灯する液晶モニターを搭載。水量や水の種類などが、よりわかりやすくなりました。

# 健やかな暮らしを運ぶ水、水素たっぷり、「電解水素水」。

アルカリッチの「電解水素水」は、水を電気分解することによって、水素をたっぷりと含んだアルカリ性の水を作り出します。さらに2種類のフィルターで原水から13物質を除去する先進の浄水機能を搭載。原水から「電解水素水」「浄水」「酸性水」の3種類の水を生成することで、調理から美容まで暮らしのさまざまなシーンでご活用いただけます。

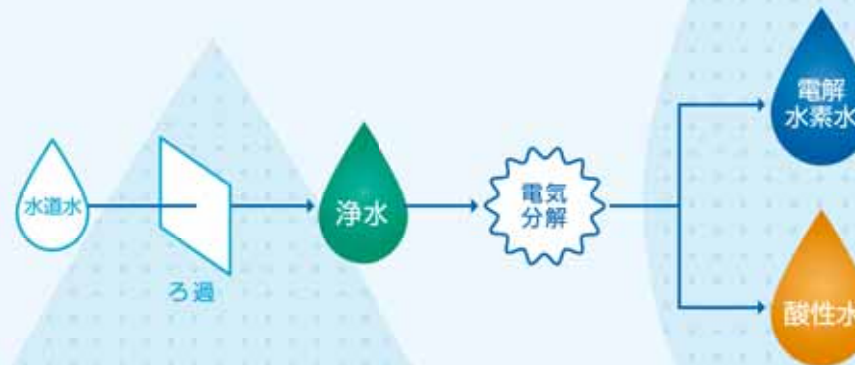

効果効能:  
胃腸症状の改善  
胃腸症状の改善とは:  
胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。  
指定管理医療機器製造販売承認番号  
第223AF8ZX00047000号

## 浄水性能の向上したカートリッジで粒子や赤錆などもシャットアウト!

有害な不純物を取り除いた不純物の少ない安全な水だから、赤ちゃんのミルクにも安心してお使いいただけます。またお薬の服用にもご使用ください。




当社で採用しているフィルターの中空糸膜には0.1マイクロメートルのろ過穴が開いており、それより大きなものは通しません。

- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質
- 遊離残留塩素
- 濁り
- 総トリハロメタン
- クロロホルム
- プロモジクロロメタン
- ジブモクロロメタン
- プロモホルム
- 農薬 (CAT)
- カビ臭 (2-MIB)
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 溶解性鉛

## 電気分解で2種類の水を生成

水道水から塩素などを取り除いた「浄水」をさらに、電解槽の中で電気分解します。マイナス極にできるのが「電解水素水」、プラス極にできるのが「酸性水」です。

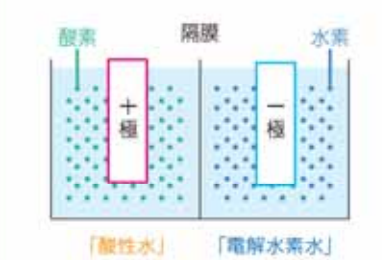

## 2つの洗浄機能でいつでも清潔

【自動洗浄でより清潔】フリップ・フロップ方式により、電解槽内のスケール(カルシウム等)付着を防止。電解槽の洗浄を効率よく行い、常に安定した電解力を維持します。(洗浄時の捨て水がありません)

【おやすみセットで管路内も清潔】ワンタッチ操作で、「電解水素水」管路内に抗菌効果の高い酸性水を溜めることで、出水口からの菌の侵入を防ぎ、「電解水素水」管路内の雑菌の増殖を抑える洗浄機能を搭載。

## 電気分解された、もうひとつの水の魅力。

電解酸性水は電解槽のプラス極側で生成される酸性の水です。洗顔や洗い物にお使いいただけます。

